

LA PERFORMANCE CLINIQUE
EN TOUTE CIRCONSTANCE



● ● ●
PROTAPER®
UNIVERSAL

The new generation

DENTSPLY
MAILLEFER

ProTaper® Universal une nouvelle génération du le plus utilisé au monde pour une endodontie:

+ simple

- une seule et même séquence d'instruments quel que soit la forme du canal
- une instrumentation facilement mémorisable (suit les codes couleur Iso)
- des solutions de séchage et d'obturation adaptées précisément aux limes ProTaper® et adoptant les mêmes codes couleurs pour une reconnaissance instantanée

+ rapide


- seulement 3 instruments nécessaires dans la majorité des cas
- une section à haut pouvoir coupant

ProTaper® Universal, un système complet adapté et à toutes les situations cliniques

Traitement


Les limes ProTaper® mécanisées permettent une mise en forme canalaire de très haute qualité en un minimum de temps.

Les limes manuelles ProTaper® For Hand Use, qui reprennent en tous points le design des versions mécanisées, permettent de traiter des cas difficiles tels que les courbures apicales sévères. Elles sont également un instrument de choix pour tous les praticiens adeptes de l'endodontie manuelle.

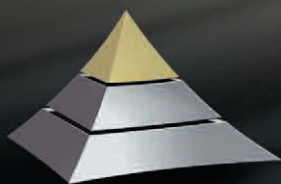

Retraitement

Des limes spécifiquement étudiées pour la reprise de traitement afin de retirer le matériau d'obturation préalablement à une nouvelle mise en forme du canal.

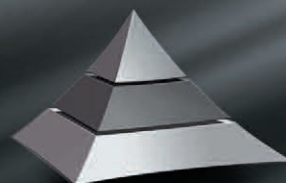

The new generation

PROTAPER®
UNIVERSAL

système Nickel Titane

+ efficace

- une forte conicité apicale permettant de mieux nettoyer le canal
- une très bonne remontée des débris grâce à un design spécifique «la conicité multiple ProTaper®»

+ sûre

- une pointe guidante arrondie pour minimiser le déport canalaire
- une série des mêmes instruments disponible en version manuelle pour traiter des cas anatomiques plus complexes ou pour ceux qui préfèrent le sens tactile des limes manuelles

aux besoins de tous les praticiens

Obturation

Adaptées aux conicités des limes ProTaper®, les pointes papier F1 à F5 permettent de sécher les canaux en un minimum de temps.

Parfaitement ajustées aux dimensions des limes de mise en forme, les obturateurs et pointes de gutta percha ProTaper® vous apporteront la garantie d'une obturation optimisée.




The new generation

PROTAPER®
UNIVERSAL

PROTAPER® TRAITEMENT

l'excellence dans l'art du traitement canalaire

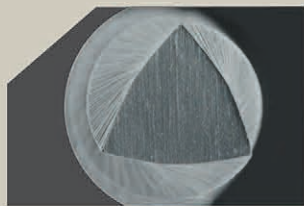


- haut pouvoir coupant pour un maximum d'efficacité
- contact dentine – instrument réduit pour minimiser l'effet de vissage

Une section triangulaire



- meilleure élimination des débris
- transport canalaire maîtrisé

Un angle d'hélice variable associée à une nouvelle pointe non coupante arrondie

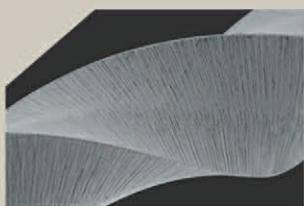


- large conicité apicale qui facilite le nettoyage et l'obturation pour un traitement plus sûr
- l'instrument subit moins de contraintes
- un minimum d'instruments pour mettre en forme le canal

Une conicité multiple

ProTaper® Universal, le minimum d'instruments pour des résultats




Sequence de base couvrant la grande majorité des cas cliniques

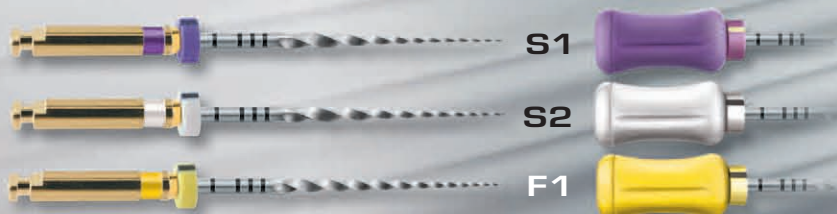

Finitions apicales larges




Finitions apicales extra larges

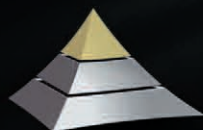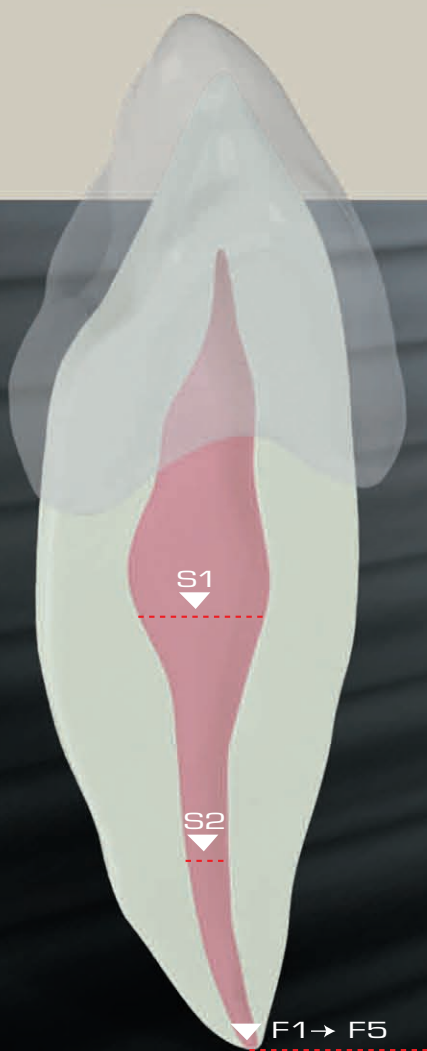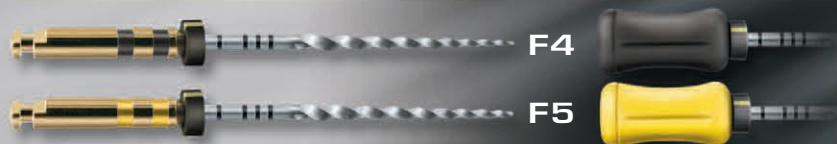


PROTAPER®
UNIVERSAL

Encore plus efficace et versatile

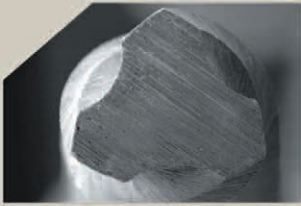

- deux nouveaux finishers F4 et F5 pour traiter des apex larges (tailles Iso 040 et 050)
- flexibilité accrue des limes F3, F4 et F5 par une section évidée
- toutes les limes sont désormais disponibles en longueur 31mm pour traiter des canaux longs
- ProTaper® For Hand Use adopte désormais des manches en Silicone pour plus de confort

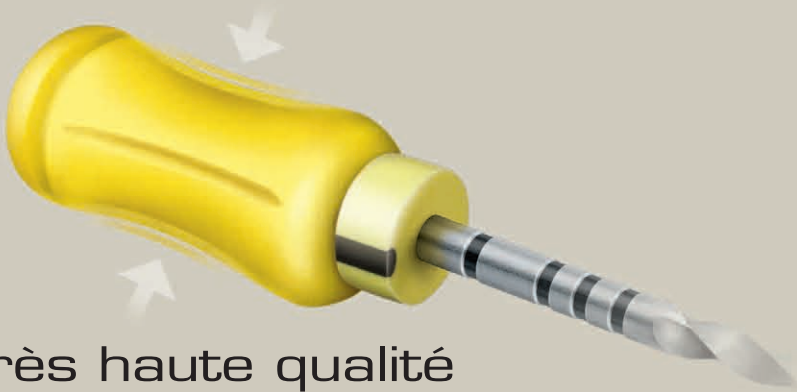


de très haute qualité

Les règles ProTaper® Traitement

- une fois la longueur de travail confirmée, utiliser chaque instrument progressivement jusqu'à celle-ci
- toujours irriguer avant d'introduire un instrument dans le canal
- nettoyer l'instrument immédiatement après usage
- les instruments ProTaper® mécanisés doivent être utilisés à une vitesse constante située entre 150 et 350 T/min.
- pour un résultat optimal, les instruments ProTaper® mécanisés S1, S2 et Sx doivent être utilisés avec un mouvement de brossage
- retirer l'instrument dès que la longueur de travail est atteinte




Si nécessaire, utiliser le ProTaper® Sx pour augmenter la conicité en partie haute de canal. En version mécanisée, le ProTaper® Sx peut également être utilisé avec un mouvement d'appui pariétal pour déporter le trajet canalaire à l'opposé de la furcation.

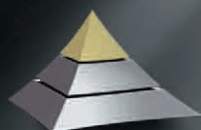

PROTAPER®
UNIVERSAL

PROTAPER® RETRAITEMENT

D1+D2+D3 : désobturez en toute tranquillité grâce à une instrumentation

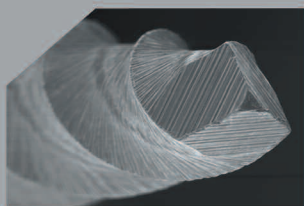


Spécifiquement adaptée pour la désobturation

- une pointe active sur la lime D1 pour favoriser la pénétration initiale
- 3 longueurs et 3 conicités progressives adaptées à chacun des tiers canaux

Une séquence facile à mémoriser

- de la lime la plus courte à la plus longue : D1 – D2 – D3

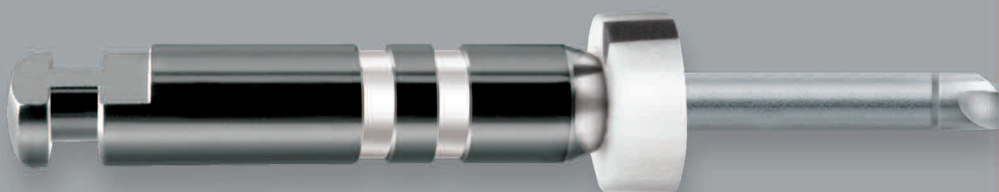


Reconnaissable instantanément

- manches gris foncés de 11 mm seulement pour une meilleure visibilité
- une, deux ou trois coches de couleur blanche suivant l'instrument sélectionné



ProTaper® D1 - désobturation du tiers coronaire

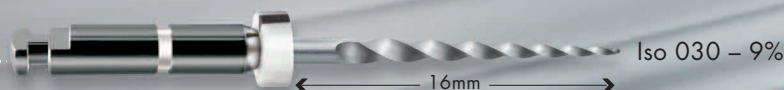

ProTaper® D2 - désobturation du tiers médian



ProTaper® D3 - désobturation du tiers apical



Les règles ProTaper® pour la désobturation

- La progression des limes se fait par très légère pression apicale
- Retirer fréquemment la lime du canal, l'inspecter, la nettoyer avant de continuer
- Si une lime ne peut plus avancer, utiliser une lime manuelle pour passer la butée et confirmer la perméabilité du canal.
- Dans le cas des pâtes solubles à base d'oxyde de zinc - eugénol, ramollir au préalable la pâte à l'aide du solvant DMS IV de Dentsply Maillefer

Vitesse de rotation recommandée:

- cas des obturations à la gutta percha ou aux obturateurs Thermafil ou ProTaper®: 500 t/min.
- cas des obturations à base d'oxyde de zinc - eugénol: 250 à 300 t/min.

Les limes Nickel Titane ne sont pas utilisables pour retirer des matériaux d'obturation à base de résine.



PROTAPER®
UNIVERSAL

PROTAPER® OBTURATION

ProTaper® Universal,
des systèmes de séchage et d'obturation
dédiés pour un confort accru



Simple

- une lime – une pointe – une obturation (pas d'erreur possible)
- identification aisée: mêmes codes couleurs et mêmes dénominations

Design Avancé

- ajustement optimal tout le long du canal
- parfaite obturation monocone ou tridimensionnelle à chaud suivant le système choisi



Rapide

- technique d'obturation à chaud en une seule étape (obturateurs ProTaper®)

Une lime – une pointe de papier –
un système d'obturation



Mode d'emploi des Obturateurs ProTaper®

- Ils doivent être chauffés à l'aide du four ThermaPrep
- Température de chauffe: utiliser le bouton correspondant aux tailles 020-060



PROTAPER®
UNIVERSAL

La gamme ProTaper® Universal

Traitement

Mécanisé

S1

S2

F1

F2

F3

F4

F5

Sx



- ProTaper® Treatment Kit
REF A 0415
- Assortiment
REF A 0409

Manuel



- Assortiment
REF A 0418



Retraitement

D1


D2

D3

- Assortiment
REF A 1412



- ProTaper® Retreatment Kit
REF A 1415

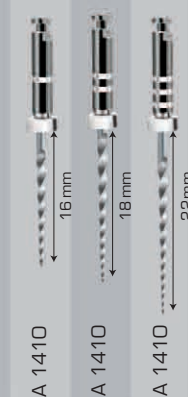

Obturation

F1

F2

F3

F4

F5

- Pointes de papier
pour ProTaper®
REF A 022W

- Pointes de Gutta Percha
pour ProTaper®
REF A 022X

- ProTaper® Obturators
REF A1411



DENTSPLY
MAILLEFER



0459 Dentsply Maillefer • CH-1338 Ballaigues • Suisse • www.dentsplymailefer.com

Toutes modifications techniques ne sont pas soumises à préavis.
Les photos de nos instruments ne sont pas contractuelles

CAV/F19 01101.F/03/2006 - updated 07/2007